



Συμβατό με όλα τα κινητά
(Android, iOS)

Διαχειριστείτε καλύτερα το Διαβήτη **EASySENSE S9 CGM**

- Μέτρηση γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο, στο μεσοκυττάριο υγρό κάθε 2 λεπτά, με ακρίβεια (MARD 9,7%), 720 μετρήσεις στο 24ωρο
- Μικρό (29,8 x 17,8 x 5,2 mm), με διακριτικό μέγεθος και αδιάβροχο σχεδιασμό
- Κατάλληλο από 2 ετών



9,7% MARD

Ακρίβεια.



IPX8



Μικρό μέγεθος

Σχεδόν όσο ένα κέρμα των 2 ευρώ.



30' λεπτά

Γρήγορη προθέρμανση σε μόλις 30 λεπτά.



14 ημέρες

Έως 14 ημέρες.



2' λεπτά

Μετρήσεις γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο ανά 2 λεπτά.




Εργονομική βαθμονόμηση



14 ημέρες

Αποθήκευση δεδομένων με αυτόματη ανάκτηση.

Σημεία τοποθέτησης

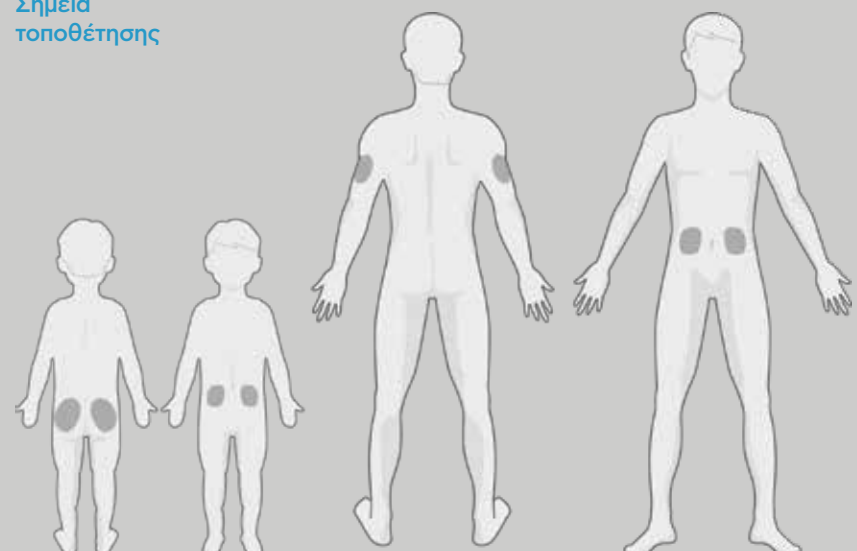

Αληθινό μέγεθος
(όσο ένα νόμισμα των 2 ευρώ)



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ!

Για όλους εμάς στην Eifron, ο άνθρωπος είναι στην καρδιά του ενδιαφέροντός μας! Παρέχουμε πλήρη εκπαίδευση για τα προϊόντα μας, με βάση τα διεθνή πρότυπα. Η ομάδα μας παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/7, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλότερη μετάβαση σε κάθε σύστημα.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη

Λεωφόρος Πολυγύρου 32, Θέρμη
2310 461 000
2310 464 000

Αθήνα

Ακακίων 52,
Εμπορικό Κέντρο Πολύδροσο

info@eifron.com
www.eifron.com

f eifron @ caringforyou v eifron4888 in Eifron





CARESENS DUAL

- Εύκολη μεταφορά δεδομένων μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Ταινίες μέτρησης με το ένζυμο GDH-FAD
- Επισήμανση ως Προγευματικό σάκχαρο, Μεταγευματικό σάκχαρο, Σάκχαρο Νηστείας



Ένδειξη ημερομηνίας λήξης ταινίας.



Αυτόματη μετατροπή από μέτρηση γλυκόζης σε μέτρηση κετονών.



Κουμπί εξαγωγής ταινίας.



Απλός τρόπος ελέγχου του συστήματος, μέσω οποιουδήποτε smartphone (Android, iOS) ή PDM με την εφαρμογή EasyPatch

Με επαναχρησιμοποιούμενη βάση αντίλας

CARESENS PRO



5 sec

Αποτελέσματα σε 5 δευτερόλεπτα.



0,4μL

Πολύ μικρό δείγμα αίματος.



12 μήνες

Μεγάλη διάρκεια ζωής. 12 μήνες μετά το άνοιγμα.

Μέτρηση με αποδεδειγμένη ακρίβεια κλινικά επαληθευμένη από το Institute for Diabetes Technology Research and Development Corporation at the University of Ulm

KETOSENS



8 sec

Αποτελέσματα σε 8 δευτερόλεπτα.




0,5μL

Πολύ μικρό δείγμα αίματος.



Χωρίς Κωδικό

Αναρροφητικού τύπου.

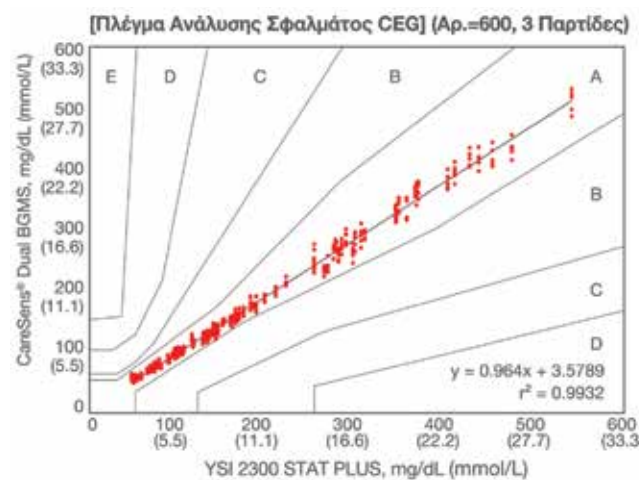

TOUCHCARE® A8 NANO

- Απλός τρόπος ελέγχου του συστήματος, μέσω οποιουδήποτε smartphone (Android, iOS) ή PDM με την εφαρμογή EasyPatch
- Κατάλληλο από 2 ετών



Χωρίς σωλήνωση



Ελαφρύ

Μικρό μέγεθος (29,8 x 17,8 x 5,2 mm), με διακριτικό σχεδιασμό.



Αδιάβροχο

IP28



- Με αυτοκόλλητη δεξαμενή τύπου patch που αλλάζει κάθε 3 ημέρες
- Η μικρότερη κι ελαφρότερη αντλία της αγοράς (διαστάσεις: 40,5 mm x 31,5 mm x 11,5 mm, βάρος: 13,8 g)




200IU & 300IU




Auto Mode (HCL)

Σύστημα TouchCare® με προηγμένο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης APGO

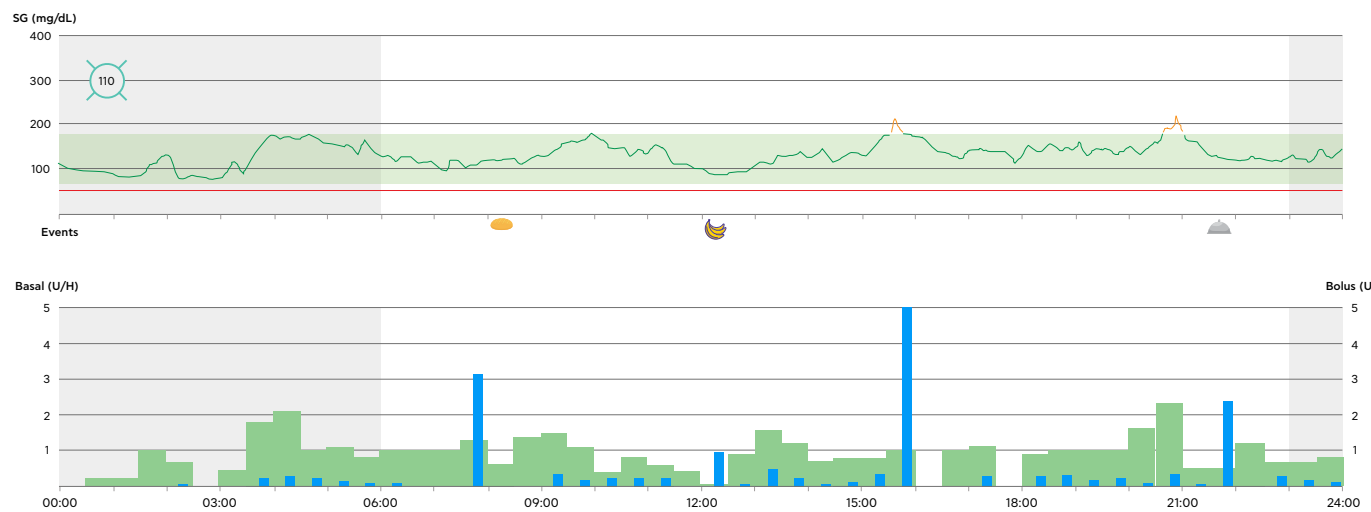

Τα βήματα από το ανοικτό στο κλειστό σύστημα με τον αυτοματισμό ανακοίνωσης γευμάτων

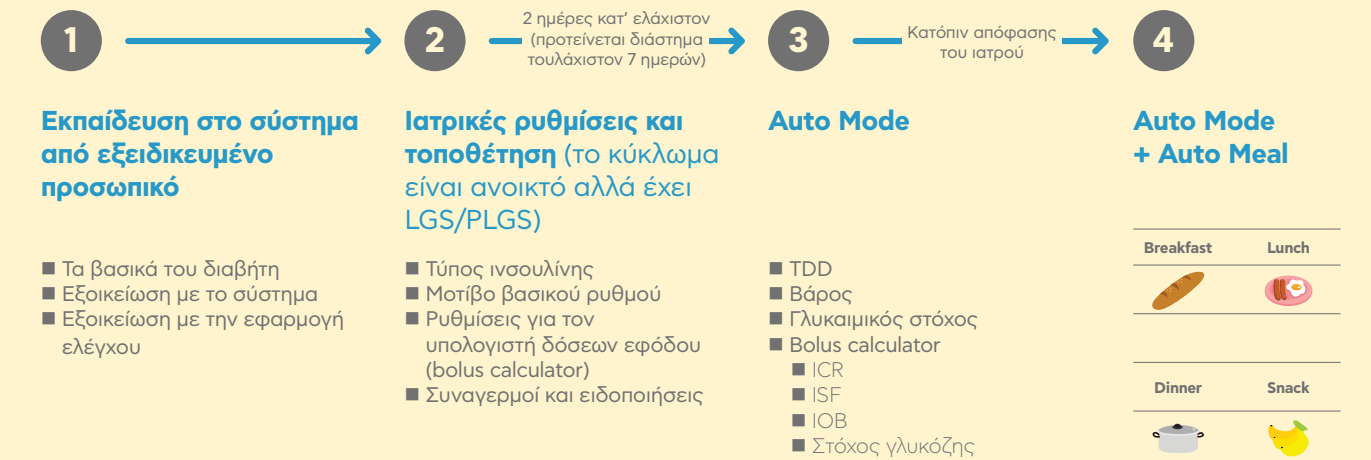

Βελτιωμένη απόδοση

Προηγμένη ακρίβεια
99,7 % των αποτελεσμάτων εντός ± 15 mg/dL (0,83 mmol/L) ή ± 15 % των αποτελεσμάτων αναφοράς, πληρώνοντας τα κριτήρια ακρίβειας του προτύπου ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015).

Within ± 5 mg/dL or $\pm 5\%$	Within ± 10 mg/dL or $\pm 10\%$	Within ± 15 mg/dL or $\pm 15\%$
400/600 (66.7%)	576/600 (96.0%)	598/600 (99.7%)

Αποδεδειγμένη ακρίβεια

- Κλινικά επαληθευμένο από το IDT¹⁾
- Με έδρα στο Πανεπιστήμιο του Ulm που εξειδικεύεται στην κλινική έρευνα στον τομέα του σακχαρώδους διαβήτη.
- Πλήρης συμμόρφωση
- Συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015)²⁾

1) IDT: Institute for Diabetes-Technology Research and Development Corporation at the University of Ulm
2) Freckmann G, et al. Evaluation of Analytical Performance of Three Blood Glucose Monitoring Systems: System Accuracy, Measurement Repeatability, and Intermediate Measurement Precision. J Diabetes Sci Technol (2018)